

DIA SCAN

Dokumentasi tampilan dan alur pengguna


Desktop & mobile

Dokumen visual dari implementasi website saat ini. Nama DIA SCAN, palet marun, dan urutan navigasi mengikuti versi terbaru.

Cakupan

Halaman publik · Akun pasien · Akun tenaga kesehatan · Tampilan responsif

Halaman akun menggunakan data contoh dan ilustrasi kaki untuk memperlihatkan UI. Tidak menggunakan rekam medis atau hasil analisis pasien nyata.

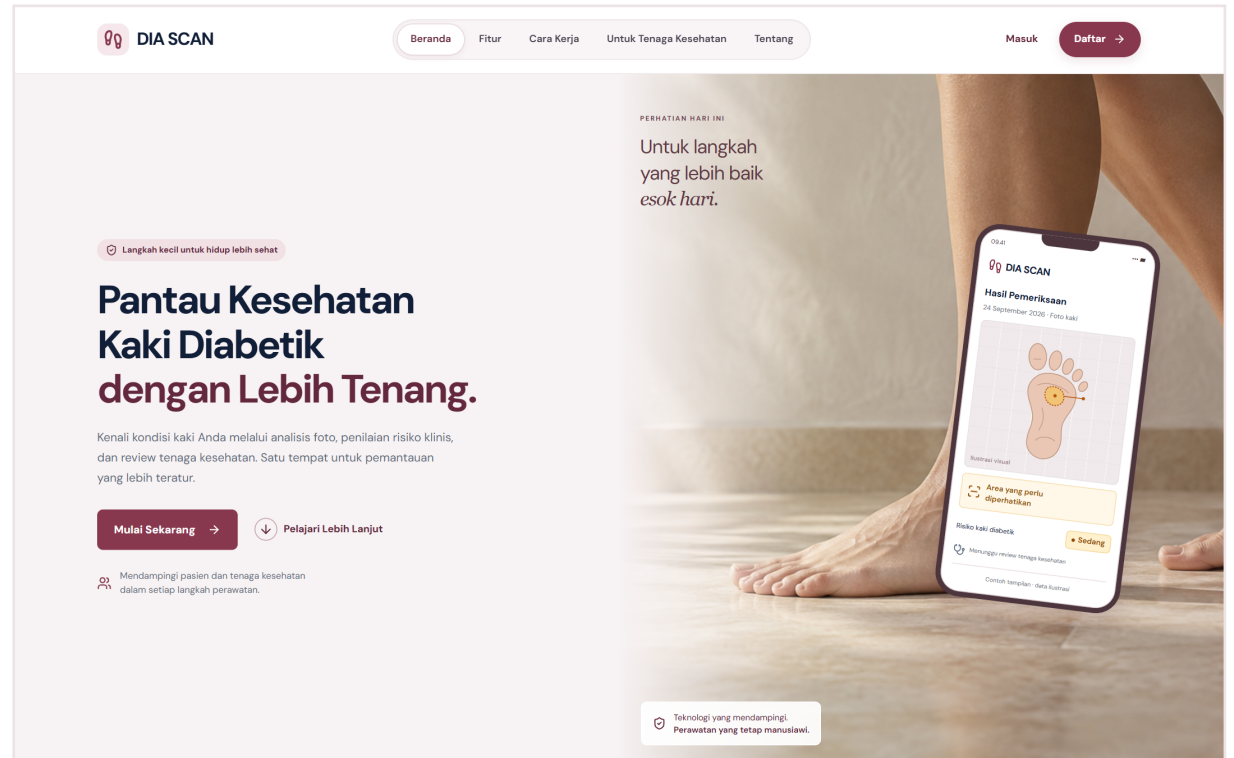

Isi dokumen

Tangkapan layar disusun mengikuti halaman publik, pasien, tenaga kesehatan, lalu mobile.

Alur pengguna	03	Hasil pemeriksaan	18
Bahasa visual & interaksi	04	Hasil pemeriksaan / lanjutan	19
Beranda dan navigasi	05	Hasil pemeriksaan / tindak lanjut	20
Fitur utama	06	Riwayat pemeriksaan	21
Cara kerja	07	Profil pasien	22
Cuplikan aplikasi	08	Dashboard tenaga kesehatan	23
Untuk tenaga kesehatan	09	Dashboard tenaga kesehatan / lanjutan	24
Tentang DIA SCAN	10	Daftar pasien	25
Masuk ke akun	11	Detail pasien	26
Masuk sebagai tenaga kesehatan	12	Review pemeriksaan	27
Pendaftaran pasien	13	Review pemeriksaan / lanjutan	28
Edukasi perawatan kaki	14	Review pemeriksaan / tindak lanjut	29
Dashboard pasien	15	Mobile / beranda & navigasi	30
Informasi kesehatan	16	Mobile / login & dashboard	31
Pemeriksaan dan foto kaki	17	Mobile / menu pasien & foto kaki	32

Alur pengguna

Peta alur berdasarkan rute dan tindakan yang tersedia pada website saat ini.

01 / PENGUNJUNG

Beranda → Fitur → Cara Kerja → Untuk Tenaga Kesehatan → Tentang

Akses lanjutan: cuplikan aplikasi, edukasi perawatan, masuk, dan daftar pasien.

02 / PASIEN



03 / TENAGA KESEHATAN



Bahasa visual & interaksi

Elemen yang dipakai pada website saat ini; tidak merupakan rancangan ulang.



Warna utama

#87384F




Hover utama

#742C43



Warna aktif

#63283D

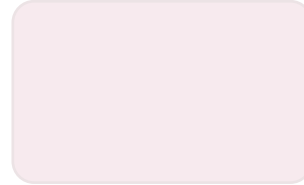


Permukaan aksen

#F7EAE



Teks utama

#17263D

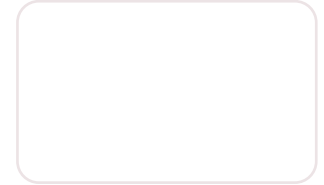

Kartu / formulir

#FFFFFF

Tipografi

DM Sans digunakan pada halaman utama, autentikasi, dan tampilan aplikasi yang diperbarui. Judul memakai bobot tebal; label, bantuan, dan metadata memakai ukuran lebih kecil.

Navigasi & umpan balik

Menu aktif, indikator langkah, kondisi memuat, pesan kesalahan, validasi isian, serta status pemeriksaan membantu pengguna memahami posisi dan tindakan berikutnya.

Komponen


Tombol utama dan sekunder, kartu ringkasan, badge risiko dan review, tab pratinjau, formulir berlabel, daftar riwayat, serta tabel pasien.

Tampilan mobile

Konten memakai susunan satu kolom. Menu utama menjadi menu buka/tutup, sementara area pasien memakai drawer navigasi. Contoh ditangkap pada 390 × 844 piksel.

Beranda dan navigasi

/ · HALAMAN PUBLIK

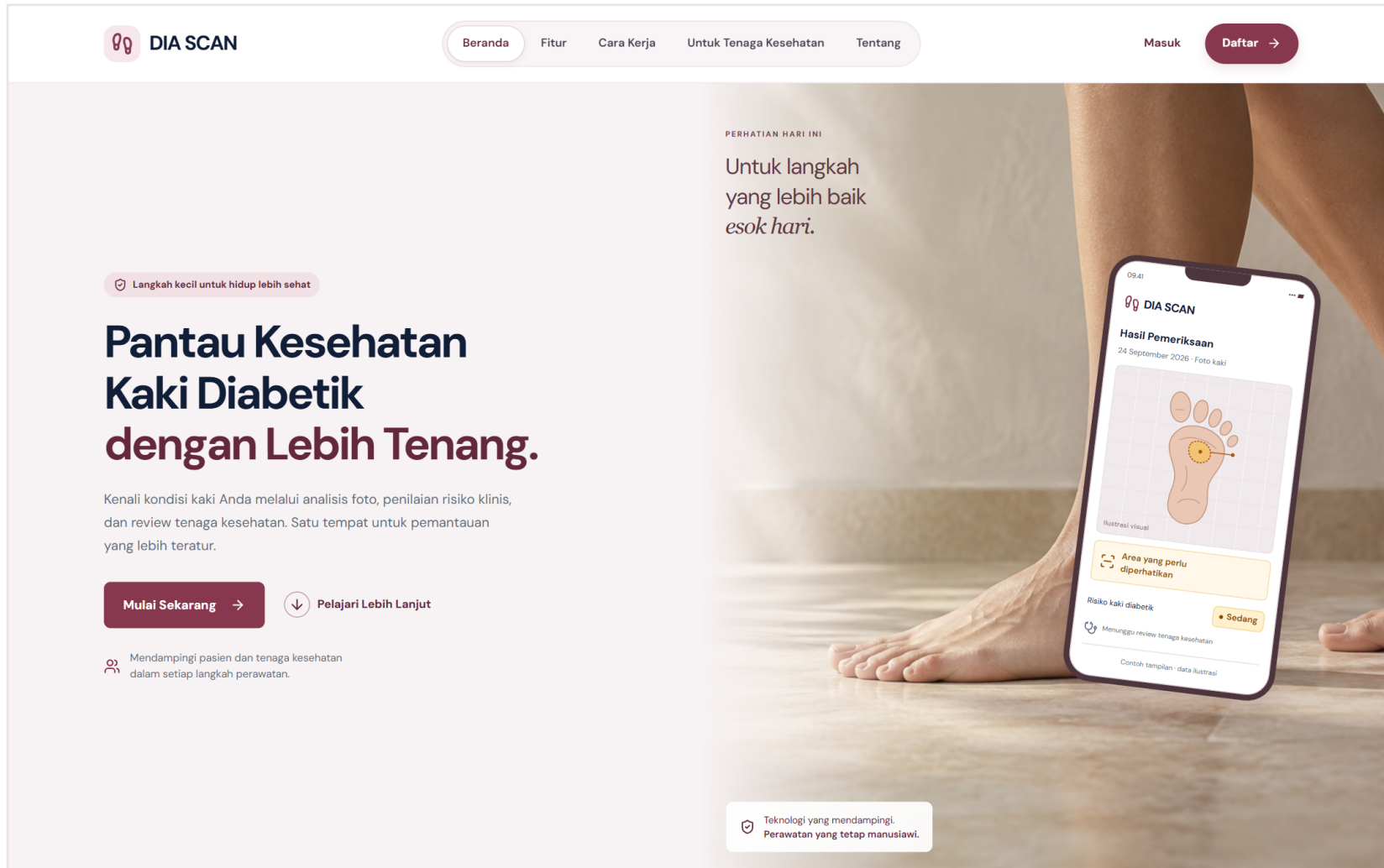

Navigasi mengikuti urutan Beranda, Fitur, Cara Kerja, Untuk Tenaga Kesehatan, dan Tentang.

Fitur utama

/ · HALAMAN PUBLIK

SOLUSI LENGKAP

Fitur Utama DIA SCAN

Catatan yang saling terhubung.
Pemantauan yang lebih mudah dipahami.

Pratinjau dengan data ilustrasi

Hasil Pemeriksaan

Temuan visual dan risiko klinis disajikan dengan jelas.

Hasil Pemeriksaan

24 September 2026 · Foto kaki

Area yang perlu diperhatikan

Risiko kaki diabetik

Sedang

Menunggu review tenaga kesehatan

Ilustrasi visual

Riwayat Pemeriksaan

Buka kembali catatan kondisi kaki Anda dari waktu ke waktu.

24 Sep 2026

Foto kaki

Sedang

10 Sep 2026

Foto kaki

Rendah

27 Agu 2026

Foto kaki

Rendah

Tersimpan untuk pemantauan berkala

Area yang Ditandai

Visualisasi area pada foto untuk membantu peninjauan.

Area yang ditandai

Membantu peninjauan visual

Ilustrasi visual

Dashboard Tenaga Kesehatan

Tinjau pemeriksaan pasien dan catat tindak lanjut klinis.

Ringkasan Pasien

Pasien

12

Belum ditinjau

3

Sudah ditinjau

9

Pasien contoh A

Pemeriksaan terbaru

Sedang

Pasien contoh B

Sudah ditinjau

Rendah

Empat kartu fitur memperlihatkan hasil, riwayat, area yang ditandai, dan dashboard tenaga kesehatan.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 06

Cara kerja

/ · HALAMAN PUBLIK

PROSES SEDERHANA

Cara Kerja DIA SCAN

Kenali aplikasinya →

Dari dokumentasi kaki hingga tindak lanjut.
Kenali setiap langkah pemeriksaan Anda.



Empat langkah menjelaskan dokumentasi foto, analisis sistem, penilaian risiko, dan review.

Cuplikan aplikasi

/ · HALAMAN PUBLIK

TAMPILAN APLIKASI

Lebih dekat dengan DIA SCAN.

Dari pemeriksaan pertama hingga riwayat perawatan. Semua tersusun dalam tampilan yang mudah Anda ikuti.

- Dashboard Pasien >
- Hasil Pemeriksaan >
- Riwayat Pemeriksaan >
- Tenaga Kesehatan >

DIA SCAN

Contoh tampilan aplikasi

A

Dashboard

Pemeriksaan

Riwayat

DASHBOARD PASIEN

Selamat datang, Andi

Setiap langkah kecil Anda berarti.



Pemeriksaan terakhir

24 Sep 2026



Risiko terakhir

Sedang



Total pemeriksaan

3 pemeriksaan

Riwayat Pemeriksaan



24 Sep 2026

Foto kaki

Sedang



10 Sep 2026

Foto kaki

Rendah



27 Agu 2026

Foto kaki

Rendah

Data ilustrasi, bukan data pasien atau hasil pemeriksaan nyata.

Tab memperlihatkan pratinjau dashboard pasien, hasil, riwayat, dan tenaga kesehatan.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 08

Untuk tenaga kesehatan

/ · HALAMAN PUBLIK



UNTUK TENAGA KESEHATAN

Konteks lebih lengkap. Peninjauan lebih terarah.

Satukan foto, informasi klinis, dan riwayat pasien untuk membantu proses review dan pencatatan tindak lanjut.

Masuk sebagai Tenaga Kesehatan →

✓ Akses melalui akun dari administrator institusi.

Ajakan masuk ke akun klinis dan informasi akses melalui administrator institusi.

Tentang DIA SCAN

/ · HALAMAN PUBLIK

KEPERCAYAAN UNTUK SETIAP LANGKAH

Mengapa Memilih DIA SCAN?

Teknologi yang dekat dengan kebutuhan Anda, dengan perawatan sebagai pusatnya.



Mudah digunakan

Alur sederhana untuk memulai dan melihat hasil pemeriksaan.



Monitoring berkala

Catatan tersimpan untuk mendukung pemantauan rutin.



Dukungan tenaga kesehatan

Peninjauan klinis tetap menjadi bagian dari perawatan.




Hasil visual yang jelas

Foto dan area yang ditandai lebih mudah dipahami.

Nilai layanan ditampilkan melalui kemudahan penggunaan, monitoring, dukungan klinis, dan visualisasi.

Masuk ke akun

/login · HALAMAN PUBLIK

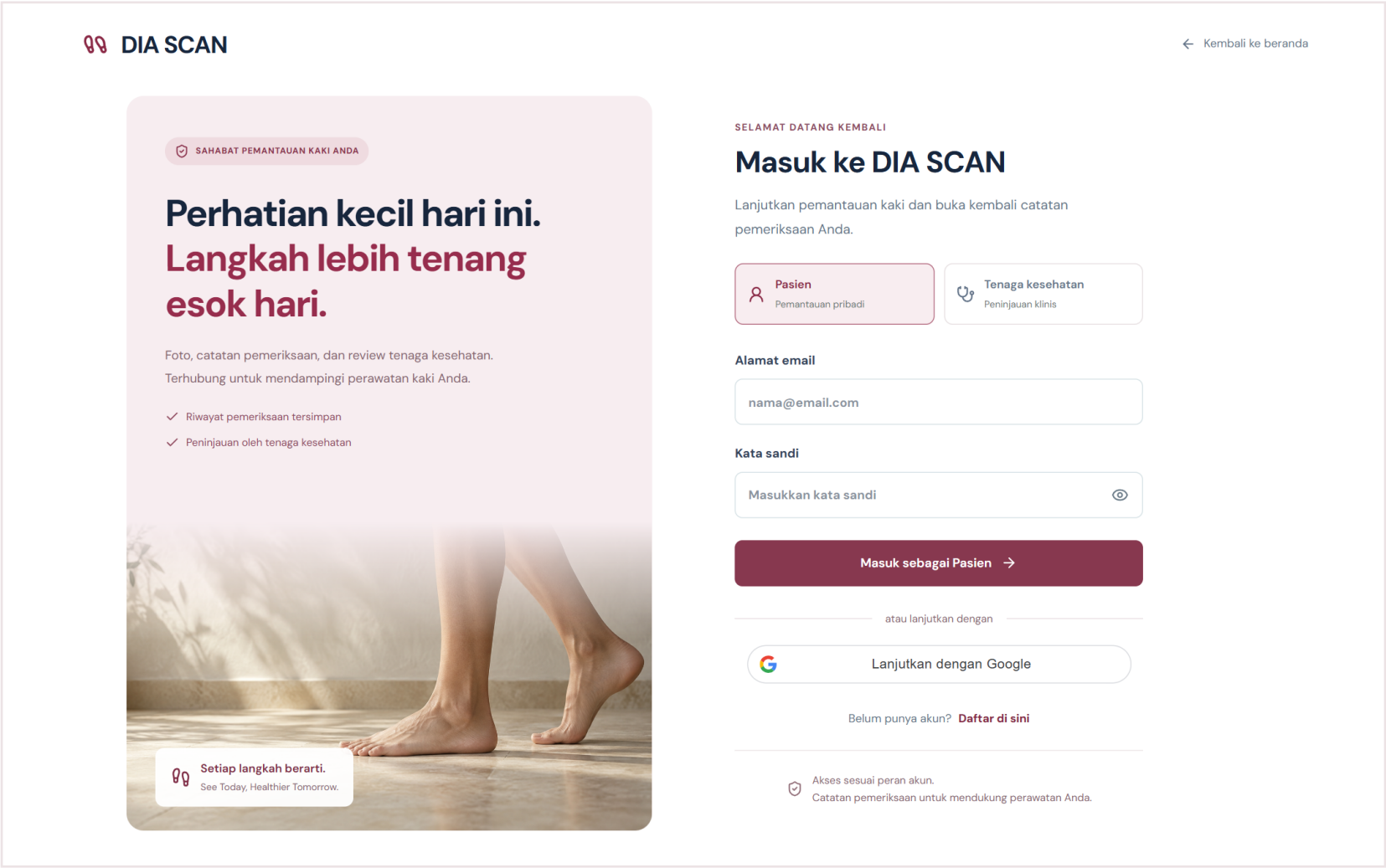

Pemilihan peran pasien atau tenaga kesehatan, email, kata sandi, dan tombol tampilkan kata sandi.

Masuk sebagai tenaga kesehatan

/login · HALAMAN PUBLIK

 **DIA SCAN**

SAHABAT PEMANTAUAN KAKI ANDA

Perhatian kecil hari ini.
Langkah lebih tenang
esok hari.

Foto, catatan pemeriksaan, dan review tenaga kesehatan.
Terhubung untuk mendampingi perawatan kaki Anda.

✓ Riwayat pemeriksaan tersimpan

✓ Peninjauan oleh tenaga kesehatan

Setiap langkah berarti.
See Today, Healthier Tomorrow.

SELAMAT DATANG KEMBALI

Masuk ke DIA SCAN

Tinjau hasil pemeriksaan pasien dan catat tindak lanjut perawatan.

Pasien
Pemantauan pribadi

Tenaga kesehatan
Peninjauan klinis

Alamat email

nama@email.com

Kata sandi

Masukkan kata sandi

Masuk sebagai Tenaga Kesehatan →

atau lanjutkan dengan

Lanjutkan dengan Google

Akun Google baru mendapat akses pasien. Akses tenaga kesehatan hanya untuk akun yang sudah terdaftar.

Belum punya akun? **Daftar di sini**

Akses sesuai peran akun.
Catatan pemeriksaan untuk mendukung perawatan Anda.

Pemilihan peran mengubah konteks login tanpa memindahkan formulir.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 12

Edukasi perawatan kaki

/education · HALAMAN PUBLIK

 **DIA SCAN**
See Today, Healthier Tomorrow

 Beranda

Masuk →

PANDUAN PASIEN

Rawat dengan tenang. Amati dengan teratur.

Panduan singkat untuk membantu pasien diabetes merawat kaki, mendokumentasikan perubahan, dan menyiapkan informasi saat berbicara dengan tenaga kesehatan.

Lihat Panduan → Mulai pemeriksaan

6Panduan singkat

4Topik utama

Materi membantu Anda membuat catatan yang lebih jelas. Informasi ini tidak menggantikan pemeriksaan tenaga kesehatan.

PERPUSTAKAAN DIA SCAN

Temukan panduan yang Anda perlukan

Pilih topik untuk menyaring materi. Setiap panduan dirancang agar dapat dibaca dalam beberapa menit.

6 panduan

Semua panduan

Perawatan harian

Perubahan yang diperhatikan

Panduan foto

Mencari bantuan

01



Perubahan yang diperhatikan · 6 menit baca

Mengenali Risiko Ulkus Kaki Diabetik

Kenali tanda perubahan pada kulit, sensasi, dan bentuk kaki sejak dini.

02



Perawatan harian · 4 menit baca

Tips Memilih Alas Kaki yang Aman

Panduan sederhana memilih alas kaki yang nyaman dan melindungi.

03



Perawatan harian · 5 menit baca

Pola Perawatan Kaki Harian

Rutinitas kecil yang membantu menjaga kebersihan dan kesehatan kaki.

Kategori artikel dan panduan perawatan menjadi akses edukasi bagi pengguna.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 14

Dashboard pasien

/patient/dashboard · DATA CONTOH



DIA SCAN
Pemantauan kaki diabetik

RUANG PASIEN

Dashboard

Pemeriksaan Baru

Riwayat Pemeriksaan

Edukasi Perawatan

Profil Saya

Beranda DIA SCAN

Setiap langkah berarti.

Catatan yang jelas untuk mendampingi perawatan kaki.

Mulai pemeriksaan →

PC

Pasien Contoh A

Akun pasien

→

Ruang Pasien / Dashboard

Beranda

PC

Profil Saya

DASHBOARD PASIEN

Selamat malam, Pasien.

Luangkan perhatian untuk setiap langkah.
Pantau kondisi kaki dan lanjutkan perawatan Anda.

Mulai Pemeriksaan Baru →

Total pemeriksaan

2 pemeriksaan

Tersimpan dalam riwayat Anda

Pemeriksaan terakhir

1 Oktober 2026

Pemeriksaan #1

Risiko terakhir

Sedang

Berdasarkan penilaian klinis

Review tenaga kesehatan

Disetujui

Status pemeriksaan terakhir

PEMANTAUAN ANDA

Pemeriksaan Terakhir

1 Oktober 2026

Ditinjau

Tidak ditemukan area yang perlu diperhatikan pada foto

Contoh kategori untuk memperlihatkan tampilan UI. Penilaian klinis dilakukan tenaga kesehatan.

Risiko kaki diabetik

Sedang

Keyakinan AI

92.0%

Lihat hasil pemeriksaan →

SATU ALUR PERAWATAN

Langkah Pemeriksaan

Informasi kesehatan

Data klinis sebagai konteks pemeriksaan.
Sudah tersedia

Dokumentasi foto kaki

Foto dan hasil analisis visual tersimpan.
Sudah tersedia

Review tenaga kesehatan

Catatan peninjauan dan tindak lanjut.

Ringkasan pemeriksaan, status, riwayat singkat, dan pintasan pemeriksaan baru.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 15

Informasi kesehatan

/patient/assessment · DATA CONTOH



DIA SCAN
Pemantauan kaki diabetik

RUANG PASIEN

Dashboard

Pemeriksaan Baru

Riwayat Pemeriksaan

Edukasi Perawatan

Profil Saya

Beranda DIA SCAN

Setiap langkah berarti.
Catatan yang jelas untuk mendampingi perawatan kaki.
Mulai pemeriksaan

PC

Pasien Contoh A
Akun pasien

Ruang Pasien / Pemeriksaan Baru

BERANDA

PC Profil Saya

PEMERIKSAAN BARU / INFORMASI KESEHATAN

Pemeriksaan Kaki Diabetik

Dokumentasikan kondisi kaki Anda dan gunakan analisis AI untuk membantu menemukan area yang perlu diperhatikan.

Analisis AI tidak menentukan apakah seseorang menderita diabetes. DIA SCAN membantu pemantauan kaki pada pasien diabetes.

Mulai dari informasi kesehatan Anda

Jawab sesuai informasi yang Anda ketahui. Jika ragu, bicarakan dengan tenaga kesehatan.

01

Pernah mengalami ulkus kaki sebelumnya?

Termasuk luka yang sudah sembuh.

Tidak

Ya

02

Memiliki neuropati atau penurunan sensasi?

Misalnya mati rasa atau sulit merasakan sentuhan.

Tidak

Ya

03

Memiliki penyakit arteri perifer (PAD)?

Gangguan aliran darah ke tungkai yang pernah dinyatakan tenaga medis.

Tidak

Ya

04

Terdapat deformitas kaki?

Perubahan bentuk kaki yang telah diketahui.

Tidak

Ya

05

Pernah mengalami amputasi?

Termasuk sebagian jari atau kaki.

Tidak

Ya

06

Memiliki gagal ginjal atau ESRD?

Riwayat gagal ginjal tahap akhir.

Tidak

Ya


Enam pertanyaan Ya/Tidak menjadi konteks klinis sebelum dokumentasi foto.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 16

Pemeriksaan dan foto kaki


/patient/scan?examination=4 · DATA CONTOH

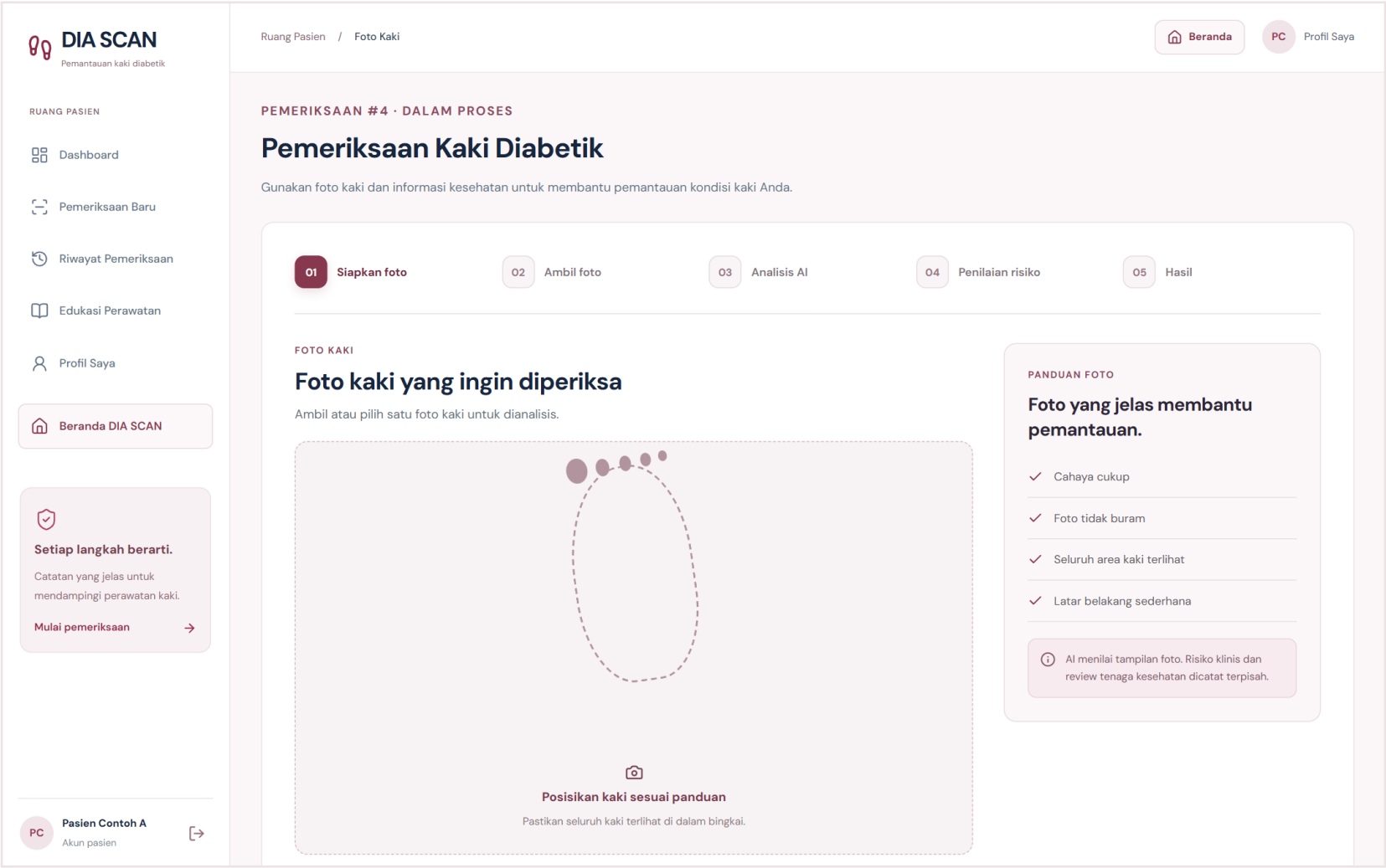

Panduan foto, Buka Kamera, Pilih Foto, dan Analisis dengan AI.

Hasil pemeriksaan

/patient/result/1 · DATA CONTOH

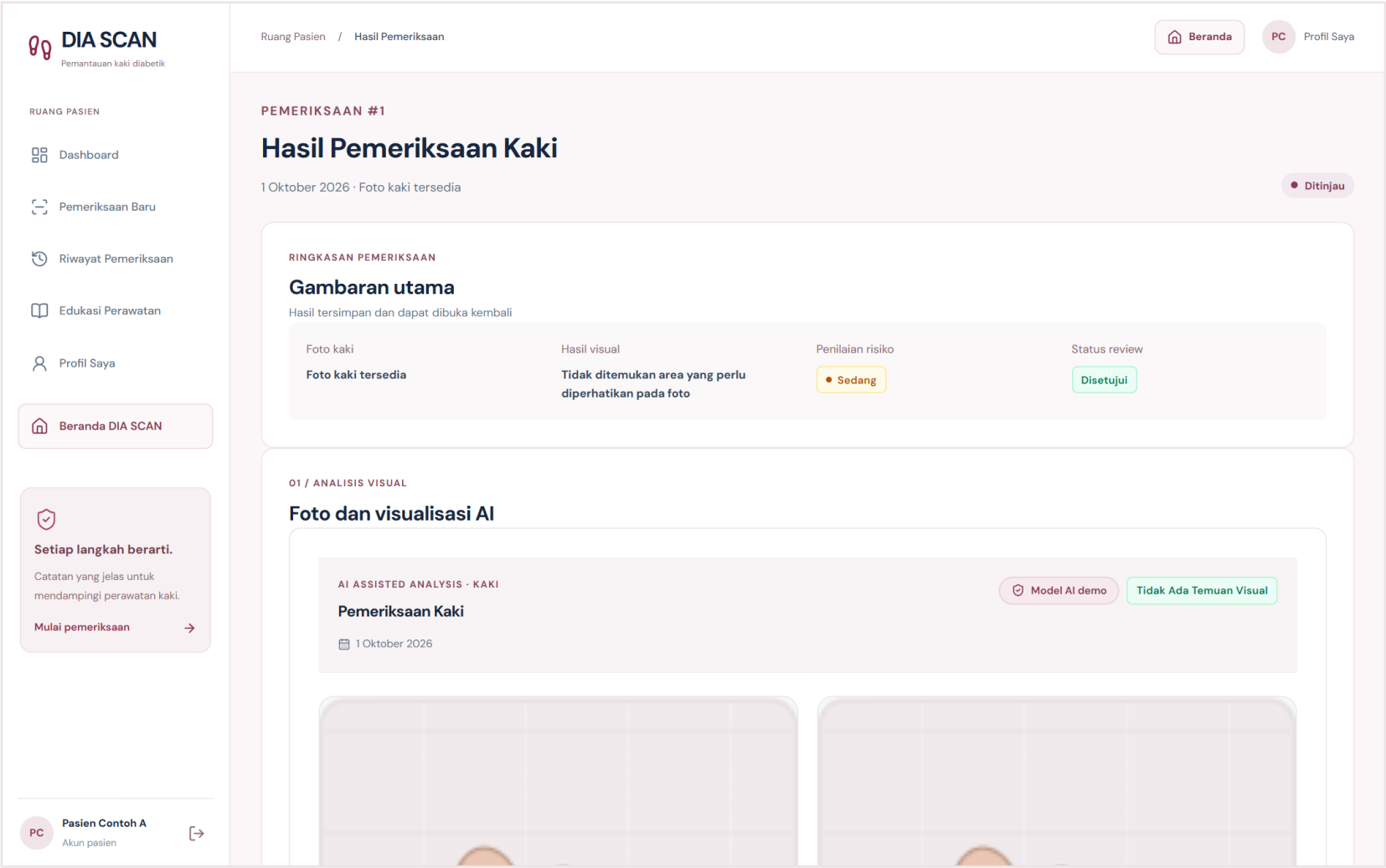

Hasil visual ditampilkan terpisah dari kategori risiko klinis dan status review.

Hasil pemeriksaan / lanjutan

/patient/result/1 · DATA CONTOH

**DIA SCAN**
Pemantauan kaki diabetik

RUANG PASIEN

 Dashboard

 Pemeriksaan Baru

 Riwayat Pemeriksaan

 Edukasi Perawatan

 Profil Saya

 Beranda DIA SCAN



Setiap langkah berarti.
Catatan yang jelas untuk mendampingi perawatan kaki.

Mulai pemeriksaan →

PC

Pasien Contoh A
Akun pasien





Foto Asli Kaki

Dokumentasi Pasien



Area yang Ditandai

Visualisasi hasil analisis

KEYAKINAN AI

92.0%

Tingkat keyakinan model terhadap temuan visual.

AREA YANG DITANDAI

0.00%

Persentase bidang visual yang terdeteksi AI.

KLASIFIKASI VISUAL

Tidak Ada Temuan Visual

Kategori visual berbantuan AI.



INTERPRETASI ANALISIS VISUAL

Tidak Ditemukan Area Lesi pada Foto

Pada foto kaki, model analisis visual AI tidak menemukan area yang melampaui ambang batas deteksi. Meskipun demikian, kualitas pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan keluhan subyektif tetap memerlukan konfirmasi tenaga medis.



Langkah selanjutnya: Lanjutkan perawatan dan inspeksi harian. Bila terdapat rasa kebas, panas, atau nyeri, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan.



AI assisted analysis — Bukan diagnosis medis: Analisis visual DIA SCAN berfungsi sebagai alat skrining awal dan pemantauan mandiri. Seluruh hasil temuan harus dikonfirmasi melalui evaluasi klinis langsung oleh dokter atau tenaga kesehatan profesional.

02 / PENILAIAN KLINIS

Penilaian Risiko Kaki Diabetik

Bagian bawah halaman memperlihatkan informasi dan tindakan lanjutan.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 19

Hasil pemeriksaan / tindak lanjut

/patient/result/1 · DATA CONTOH



DIA SCAN

Pemantauan kaki diabetik

RUANG PASIEN

 Dashboard

 Pemeriksaan Baru

 Riwayat Pemeriksaan

 Edukasi Perawatan

 Profil Saya

 Beranda DIA SCAN



Setiap langkah berarti.

Catatan yang jelas untuk mendampingi perawatan kaki.

Mulai pemeriksaan

→

PC

Pasien Contoh A

Akun pasien



01 / PEMERIKSAAN VISUAL



Tidak Ditemukan Area Lesi pada Foto

Pada foto kaki, model analisis visual AI tidak menemukan area yang melampaui ambang batas deteksi. Meskipun demikian, kualitas pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan keluhan subyektif tetap memerlukan konfirmasi tenaga medis.



Langkah selanjutnya: Lanjutkan perawatan dan inspeksi harian. Bila terdapat rasa kebas, panas, atau nyeri, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan.



AI assisted analysis — Bukan diagnosis medis: Analisis visual DIA SCAN berfungsi sebagai alat skrining awal dan pemantauan mandiri. Seluruh hasil temuan harus dikonfirmasi melalui evaluasi klinis langsung oleh dokter atau tenaga kesehatan profesional.

02 / PENILAIAN KLINIS

Penilaian Risiko Kaki Diabetik

Sedang

Contoh kategori untuk memperlihatkan tampilan UL. Penilaian klinis dilakukan tenaga kesehatan.

03 / TINDAK LANJUT

Review Tenaga Kesehatan

Disetujui

Ditinjau 1 Oktober 2026

Contoh catatan peninjauan untuk dokumentasi antarmuka.



DIA SCAN merupakan alat bantu skrining dan monitoring. Hasil tidak menggantikan pemeriksaan tenaga kesehatan.

Unduh Ringkasan

Pemeriksaan Baru

Lihat Riwayat →

© 2026 DIA SCAN

See Today, Healthier Tomorrow.

Penilaian klinis, status review, dan tindakan pada akhir halaman.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 20

Riwayat pemeriksaan

/patient/history · DATA CONTOH

 **DIA SCAN**
Pemantauan kaki diabetik

RUANG PASIEN

 Dashboard

 Pemeriksaan Baru

 **Riwayat Pemeriksaan**

 Edukasi Perawatan

 Profil Saya

 Beranda DIA SCAN

 **Setiap langkah berarti.**
Catatan yang jelas untuk mendampingi perawatan kaki.
Mulai pemeriksaan →

 **Pasien Contoh A**
Akun pasien



Ruang Pasien / Riwayat Pemeriksaan

 Beranda

 Profil Saya

RIWAYAT PASIEN

Riwayat Pemeriksaan

Buka kembali foto kaki, hasil analisis AI, dan review tenaga kesehatan dari waktu ke waktu.

Pemeriksaan Baru →

Daftar Pemeriksaan2 catatan

Tanggal

Risiko

Status review

dd/mm/yyyy

Semua risiko

Semua status

Tanggal	Foto Kaki	Kategori Risiko	Status Review	Aksi
1 Oktober 2026		Sedang	Disetujui	Lihat →
1 Oktober 2026		Rendah	Belum ditinjau	Lihat →


© 2026 DIA SCAN

See Today. Healthier Tomorrow.

Daftar pemeriksaan yang dapat dibuka kembali untuk melihat hasil dan tindak lanjut.

Profil pasien

/patient/profile · DATA CONTOH

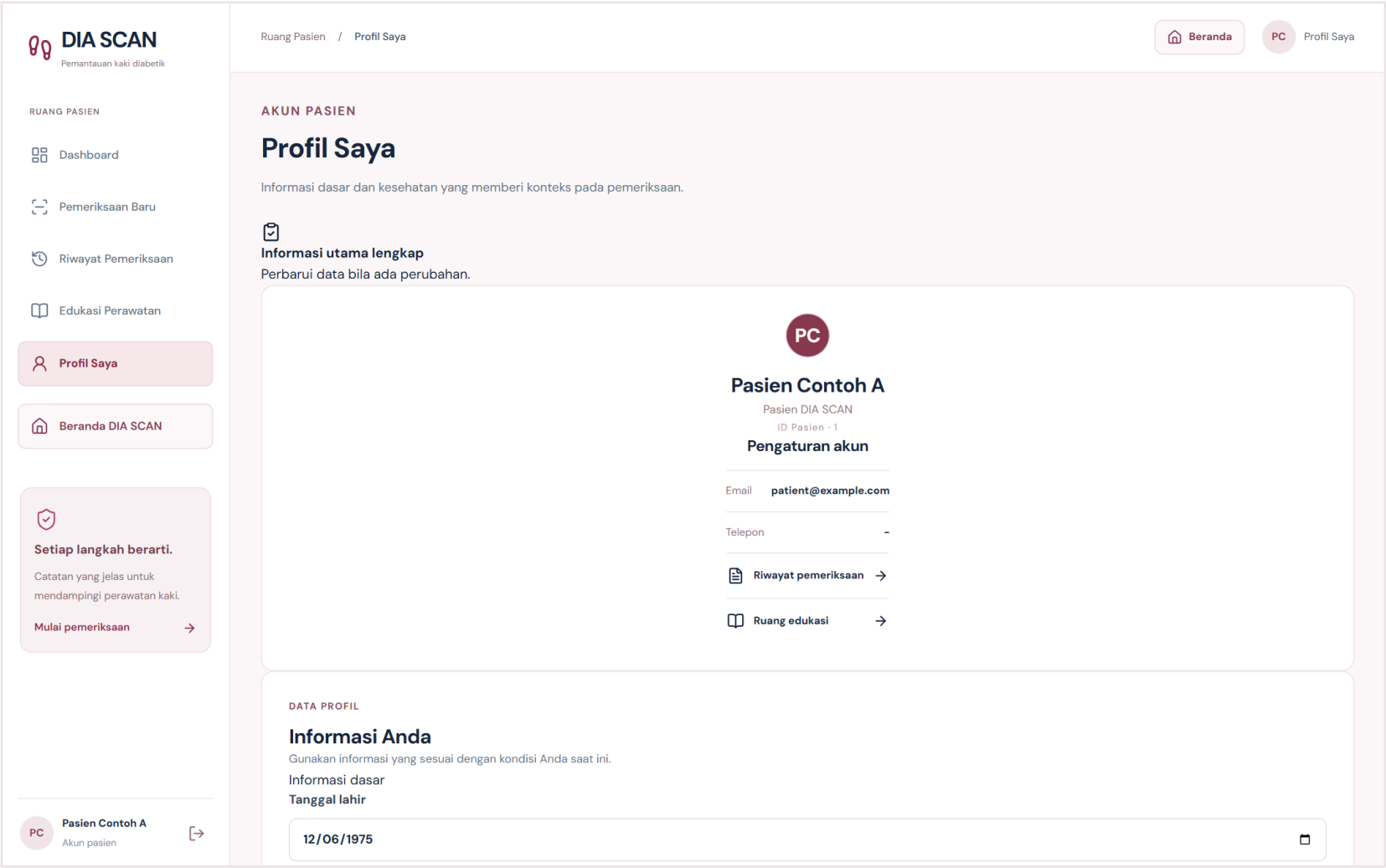

Data identitas dan informasi diabetes dapat diperbarui dari area profil.

Dashboard tenaga kesehatan

/provider/dashboard · DATA CONTOH

 **DIA SCAN**
Pemantauan kaki diabetik

RUANG TENAGA KESEHATAN

Dashboard

Daftar Pasien

Antrean Review

Edukasi Perawatan

Beranda DIA SCAN

Setiap langkah berarti.

Catatan yang jelas untuk mendampingi perawatan kaki.

Lihat daftar pasien

dr. Contoh

Tenaga kesehatan

Tenaga Kesehatan / Dashboard

Beranda

DC Daftar Pasien

DASHBOARD TENAGA KESEHATAN

Selamat malam, dr. Contoh

Tinjau kondisi kaki pasien, hasil pemeriksaan, dan catatan tindak lanjut.

2 belum ditinjau

dr. Contoh

Total Pasien

3

AKTIF TERDAFTAR

Pasien dalam daftar

Pasien Risiko Tinggi

1

PERLU PERHATIAN

Risiko komplikasi tinggi

Belum Ditinjau

2

PERLU DITINJAU

Menunggu validasi dokter

Memiliki Catatan Review

1

TERDOKUMENTASI

Review pemeriksaan terakhir

PRIORITAS KLINIS

2 Kasus Perlu Ditinjau

Antrean Prioritas Review

Pemeriksaan pasien yang memerlukan validasi klinis tenaga kesehatan. Diurutkan berdasarkan tingkat risiko tertinggi.

PASIENT

RISIKO

TEMUAN VISUAL

STATUS REVIEW

PEMERIKSAAN TERAKHIR

AKSI

Pasien Contoh B

51 th · pasien2@example.com

Tinggi

Tidak ditemukan area yang perlu diperhatikan pada foto (92%)

Belum ditinjau

1 Oktober 2026

Lihat Pasien

Tinjau Pemeriksaan

Pasien Contoh C

51 th · pasien3@example.com

Rendah

Tidak ditemukan area yang perlu diperhatikan pada foto (92%)

Belum ditinjau

1 Oktober 2026

Lihat Pasien

Tinjau Pemeriksaan

Ringkasan klinis, antrean review menurut prioritas, dan direktori pasien.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 23

Dashboard tenaga kesehatan / lanjutan

/provider/dashboard · DATA CONTOH

 **DIA SCAN**
Pemantauan kaki diabetik

RUANG TENAGA KESEHATAN

Dashboard

Daftar Pasien

Antrean Review

Edukasi Perawatan

Beranda DIA SCAN

✓

Setiap langkah berarti.

Catatan yang jelas untuk mendampingi perawatan kaki.

Lihat daftar pasien →

DC

dr. Contoh
Tenaga kesehatan

→

PC 51 th · pasien3@example.com

Kendak

yang perlu diperhatikan (92%)

Belum ditinjau

1 Oktober 2026

Tinjau Pemeriksaan

DIREKTORI PASIEN

Daftar Pasien Terpantau

Total 3 dari 3 pasien terdaftar

Cari nama, email, atau ID pasien...

Risiko: Semua Risiko

Status: Semua Status

Urutan: Scan Terbaru

⌵

Nama Pasien ⬆	Pemeriksaan Terakhir ⬆	Kategori Risiko ⬆	Hasil Visual	Review Klinis	Aksi
PC Pasien Contoh A 51 th · pasien1@example.com	1 Oktober 2026	Sedang	Analisis AI Selesai	Disetujui	Tinjau →
PC Pasien Contoh B 51 th · pasien2@example.com	1 Oktober 2026	Tinggi	Analisis AI Selesai	Belum ditinjau	Tinjau →
PC Pasien Contoh C 51 th · pasien3@example.com	1 Oktober 2026	Rendah	Analisis AI Selesai	Belum ditinjau	Tinjau →

PANEL REVIEW CEPAT

Pemeriksaan Belum Ditinjau

2 antrean

Pemeriksaan terbaru yang memerlukan validasi dokter dan penetapan risiko klinis.

PC Pasien Contoh B
ID #2 · 51 th

Tinggi

1 Oktober 2026

92% Keyakinan AI

Tinjau Pemeriksaan →

PC Pasien Contoh C
ID #3 · 51 th

Rendah

1 Oktober 2026

92% Keyakinan AI

Tinjau Pemeriksaan →

Bagian bawah halaman memperlihatkan informasi dan tindakan lanjutan.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 24

Daftar pasien

/provider/patients · DATA CONTOH

**DIA SCAN**
Pemantauan kaki diabetik

RUANG TENAGA KESEHATAN

 Dashboard

 **Daftar Pasien**

 Antrean Review

 Edukasi Perawatan

 Beranda DIA SCAN



Setiap langkah berarti.
Catatan yang jelas untuk mendampingi perawatan kaki.
[Lihat daftar pasien](#) →

 **dr. Contoh**
Tenaga kesehatan



Tenaga Kesehatan / Daftar Pasien

Beranda

DC Daftar Pasien

MANAJEMEN PASIEN

Daftar pasien

Temukan pemeriksaan terakhir dan status review pasien.

Pasien terpantau

3 pasien

Risiko

Semua risiko

Status review

Semua status

Nama	Usia	Pemeriksaan terakhir	Kategori risiko	Status review	Aksi
PC Pasien Contoh A	51 th	1 Oktober 2026	Sedang	Disetujui	Lihat →
PC Pasien Contoh B	51 th	1 Oktober 2026	Tinggi	Belum direview	Lihat →
PC Pasien Contoh C	51 th	1 Oktober 2026	Rendah	Belum direview	Lihat →

© 2026 DIA SCAN

See Today. Healthier Tomorrow.

Pencarian nama, filter risiko, filter status review, dan akses ke profil pasien.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 25

Detail pasien

/provider/patients/1 · DATA CONTOH

**DIA SCAN**
Pemantauan kaki diabetik

RUANG TENAGA KESEHATAN

 Dashboard

 Daftar Pasien

 Antrean Review

 Edukasi Perawatan

 Beranda DIA SCAN

**Setiap langkah berarti.**
Catatan yang jelas untuk mendampingi perawatan kaki.

Lihat daftar pasien →

 **dr. Contoh**
Tenaga kesehatan



Tenaga Kesehatan / Detail Pasien

 Beranda

 Daftar Pasien

← Kembali ke daftar pasien

PASIENT / 1

Pasien Contoh A

51 th · Diabetes type2

RINGKASAN PASIEN

Informasi yang tersedia

Tanggal lahir

12 Juni 1975

Telepon

-

Email

pasien1@example.com

PEMERIKSAAN TERAKHIR

Catatan terbaru

 1 OKTOBER 2026



Foto Kaki

Pemeriksaan #1

 Tidak ditemukan area yang perlu diperhatikan pada foto

Risiko

Sedang

Review

Disetujui

Tinjau pemeriksaan →

ANALISIS VISUAL

Tidak ditemukan area yang perlu diperhatikan pada foto

PENILAIAN KLINIS

Risiko telah dinilai

Informasi pasien dan pemeriksaan terakhir ditampilkan sebagai konteks peninjauan.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 26

Review pemeriksaan

/provider/examinations/2 · DATA CONTOH

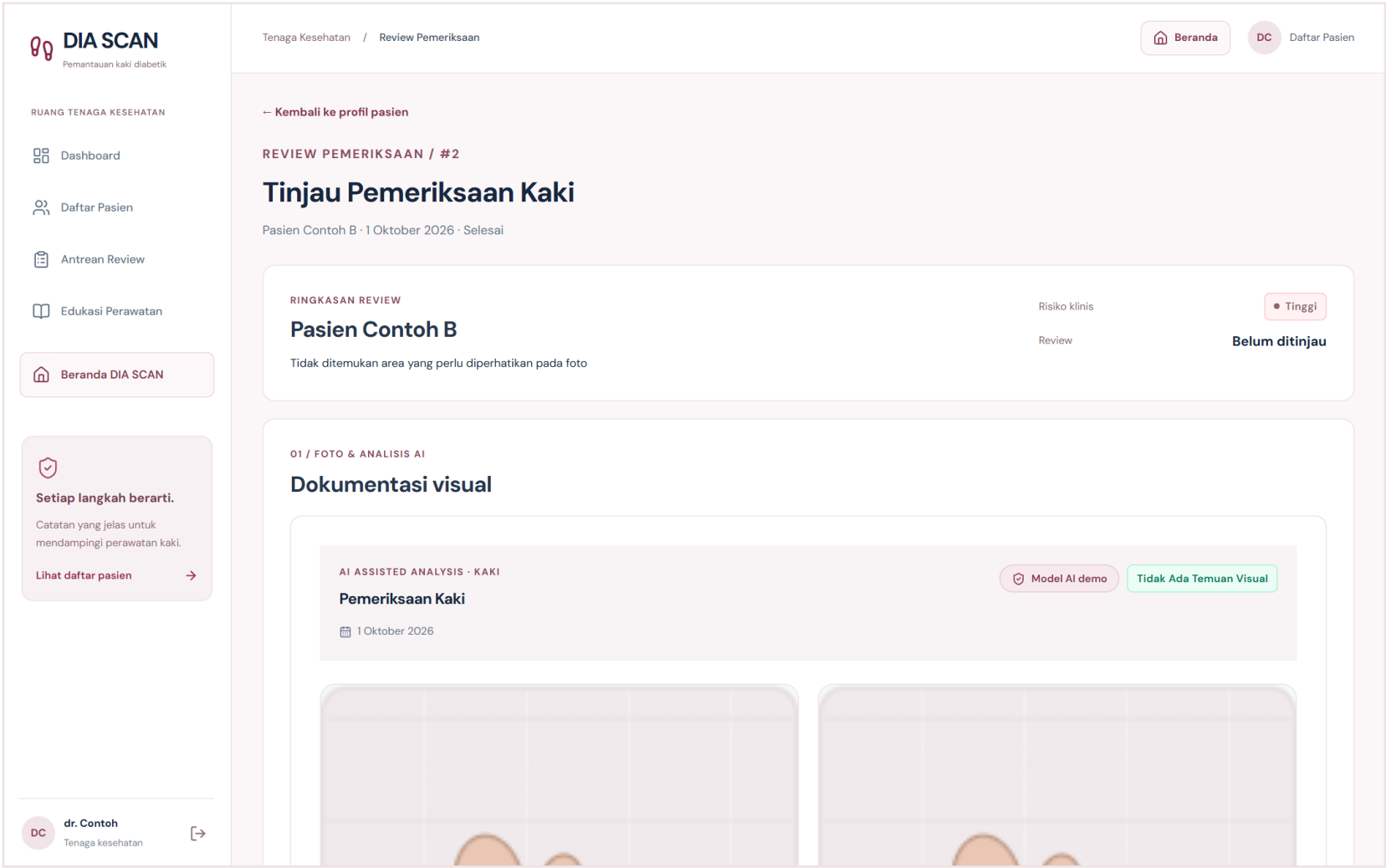


Foto dan analisis visual, faktor klinis, kategori risiko, dan formulir review.

Review pemeriksaan / lanjutan

/provider/examinations/2 · DATA CONTOH

**DIA SCAN**
Pemantauan kaki diabetik

RUANG TENAGA KESEHATAN

 Dashboard

 Daftar Pasien

 Antrean Review

 Edukasi Perawatan

 Beranda DIA SCAN



Setiap langkah berarti.
Catatan yang jelas untuk mendampingi perawatan kaki.

Lihat daftar pasien

→

 **dr. Contoh**
Tenaga kesehatan

→

02 / FAKTOR KLINIS

Informasi kesehatan

03 / RISIKO KLINIS

Penilaian Risiko Kaki Diabetik



Foto Asli Kaki

Dokumentasi Pasien



Area yang Ditandai

Visualisasi hasil analisis

KEYAKINAN AI

92.0%

Tingkat keyakinan model terhadap temuan visual.

AREA YANG DITANDAI

0.00%

Persentase bidang visual yang terdeteksi AI.

KLASIFIKASI VISUAL

Tidak Ada Temuan Visual

Kategori visual berbantuan AI.



INTERPRETASI ANALISIS VISUAL

Tidak Ditemukan Area Lesi pada Foto

Pada foto kaki, model analisis visual AI tidak menemukan area yang melampaui ambang batas deteksi. Meskipun demikian, kualitas pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan keluhan subyektif tetap memerlukan konfirmasi tenaga medis.



Langkah selanjutnya: Lanjutkan perawatan dan inspeksi harian. Bila terdapat rasa kebas, panas, atau nyeri, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan.



AI assisted analysis — Bukan diagnosis medis: Analisis visual DIA SCAN berfungsi sebagai alat skrining awal dan pemantauan mandiri. Seluruh hasil temuan harus dikonfirmasi melalui evaluasi klinis langsung oleh dokter atau tenaga kesehatan profesional.

Bagian bawah halaman memperlihatkan informasi dan tindakan lanjutan.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 28

Review pemeriksaan / tindak lanjut

/provider/examinations/2 · DATA CONTOH

 **DIA SCAN**

Pemantauan kaki diabetik

RUANG TENAGA KESEHATAN

 Dashboard

 Daftar Pasien

 Antrean Review

 Edukasi Perawatan

 Beranda DIA SCAN

 **Setiap langkah berarti.**

Catatan yang jelas untuk mendampingi perawatan kaki.

Lihat daftar pasien

→

DC

dr. Contoh

Tenaga kesehatan



Informasi kesehatan

LOPS / neuropati	Ya
Penyakit arteri perifer (PAD)	Tidak
Deformitas kaki	Tidak
Riwayat ulkus	Tidak
Riwayat amputasi	Tidak
Gagal ginjal / ESRD	Tidak

06 — HEALTHCARE PROVIDER REVIEW

Review tenaga kesehatan

Catatan klinis

Tuliskan temuan dan tindak lanjut...

Status review

Menunggu

▼

Simpan Review

→

Penilaian Risiko Kaki Diabetik

Tinggi

Contoh kategori untuk memperlihatkan tampilan UI. Penilaian klinis dilakukan tenaga kesehatan.

 Analisis AI adalah alat bantu keputusan dan tidak menggantikan penilaian klinis.

© 2026 DIA SCAN

See Today. Healthier Tomorrow.

Penilaian klinis, status review, dan tindakan pada akhir halaman.

DIA SCAN / Tampilan website saat ini

1 Oktober 2026 | 29

Tampilan mobile

Mobile / beranda · Mobile / navigasi



Mobile / beranda

/

Konten disusun satu kolom dengan menu yang dapat dibuka.



Mobile / navigasi

/

Menu mobile menampilkan tautan bagian halaman dan akses akun.

Tampilan mobile

Mobile / login · Mobile / dashboard



 Kembali ke beranda

SELAMAT DATANG KEMBALI

Masuk ke DIA SCAN

Lanjutkan pemantauan kaki dan buka kembali catatan pemeriksaan Anda.



Pasien

Pemantauan pribadi



Tenaga kesehatan

Peninjauan klinis

Alamat email

nama@email.com

Kata sandi

Masukkan kata sandi



Masuk sebagai Pasien →

atau lanjutkan dengan



Lanjutkan dengan Google

Belum punya akun? [Daftar di sini](#)



Akses sesuai peran akun.
Catatan pemeriksaan untuk mendukung perawatan Anda.

Mobile / login

/login

Formulir login pada layar 390 x 844 piksel.

 Dashboard



PC

DASHBOARD PASIEN

Selamat malam, Pasien.

Luangkan perhatian untuk setiap langkah.
Pantau kondisi kaki dan lanjutkan perawatan Anda.



 Mulai Pemeriksaan Baru →





Total pemeriksaan

2

Tersimpan dalam riwayat Anda



Pemeriksaan terakhir

1 Oktober 2026

Pemeriksaan #1



Risiko terakhir

Sedang

Berdasarkan penilaian klinis



Review tenaga kesehatan

Disetujui

Status pemeriksaan terakhir

Mobile / dashboard


/patient/dashboard

Dashboard pasien menggunakan susunan kartu satu kolom.

Data contoh untuk dokumentasi UI.

Tampilan mobile

Mobile / menu pasien · Mobile / foto kaki

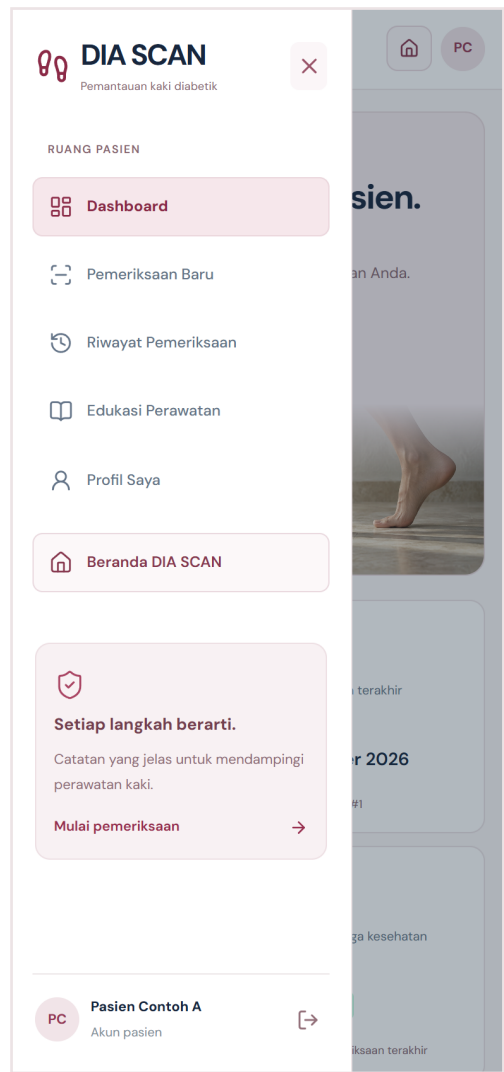

Mobile / menu pasien

/patient/dashboard

Menu samping dibuka sebagai drawer untuk akses fitur pasien.

Data contoh untuk dokumentasi UI.



Mobile / foto kaki

/patient/scan?examination=4

Alur dokumentasi foto menyesuaikan lebar layar mobile.

Data contoh untuk dokumentasi UI.